

smile

Инфракрасный массажер BMI 3010

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:	BMI 3010
Напряжение:	230V
Мощность:	10W

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для личного пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить. Тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Поэтому выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться.
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте его рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; он не должен контактировать с водой или какими-либо другими жидкостями. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Если на прибор попала влага, или же, если он намок, нужно немедленно вынуть штекер из штепсельной розетки. При этом не опускайте руки в воду!
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные меры безопасности.

Не подносите прибор близко к глазам или чувствительным участкам лица.


Не пользуйтесь прибором под одеялом или в другом плохо проветриваемом месте.

Обзор деталей прибора.

- 1 Функциональный переключатель (Рис.1)
- 2 Инфракрасные светодиоды (Рис.2)
- 3 Массажная головка

Принадлежности (Рис.3)

- A Насадка для кожи головы
- B Насадка для тела
- C Насадка для рук и ног
- D Инфракрасный массаж
- E Насадка для лица

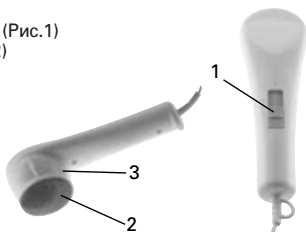


Применение прибора

- Вставьте вилку в розетку с напряжением сети 220V, 50Hz, установленную в соответствии с предписаниями.
- Включайте прибор максимум на 20 минут. После этого дайте ему 15 минут охладиться.

Функциональный переключатель (Рис.1)

- 0 - Выкл
- 1 - Массаж
- 2 - Инфракрасное тепло
- 1+2 - Массаж с применением инфракрасного тепла

- Включите про помощи функционального переключателя необходимый режим работы
- Действие прибора наиболее эффективно, если его применять на голое тело. При пользовании инфракрасным теплом, проверьте на ощупь температуру головки прибора.

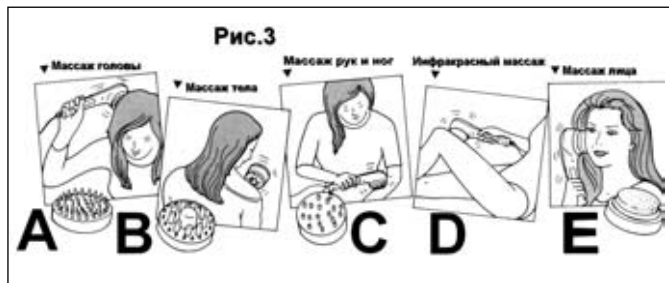

Массажные насадки

По мере надобности наденьте на массажную головку одну из массажных насадок

A – Насадка для массажа кожи головы (стимулирует кровообращение)

B – Насадка для массажа тела (интенсивный массаж при болях и напряжениях в мышцах)

C – Насадка для массажа рук и ног (глубокий массаж, удаляет напряжение в мышцах)

D – Инфракрасный массаж

E – Насадка для массажа лица (стимулирует кровообращение)

Чистка прибора

- Перед чисткой прибора, всегда вынимайте вилку из розетки.

- Протирайте корпус прибора сухой тряпкой.

Хранение

Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей. Не наматывайте шнур вокруг прибора. Не подвешивайте прибор за сетевой шнур.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком, в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату аккредитованными сервисными центрами.

Техническая характеристика

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.